

Električni odstranjivač uši LiceStop

Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji električnog odstranjivača uši LiceStop!

Dobit ćete u paketu:

- Odstranjivač uši LiceStop,
- polnilni kabel,
- 4x filter,
- četkica za čišćenje.




Sestavni dijelovi:

1. Odstranjivač uši LiceStop,
2. češalj,
3. gumb za uključivanje/isključivanje odstranjivača,
4. filter,
5. kabel za napajanje.


Uporaba

Prije svake uporabe dobro počešljajte kosu. Rasporedite kosu koja je dulja u pramenovima.

1. Sigurno pričvrstite filtar za uklanjanje ušiju na češalj za uklanjanje dok ne začujete klik. Zatim stavite češalj na sredstvo za uklanjanje uši. Ispravan podjest prikazan je na slici 1.

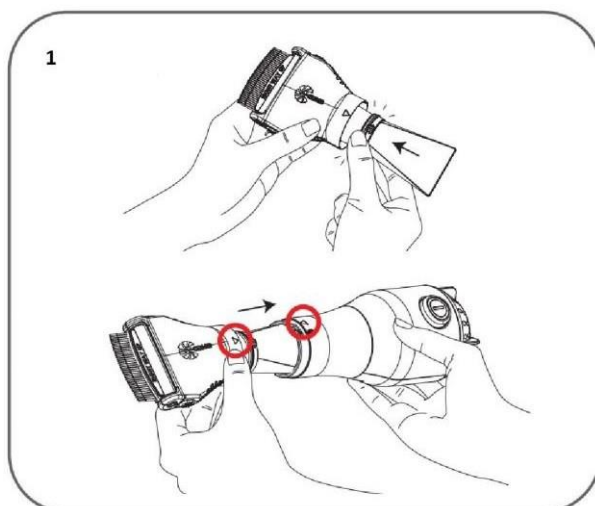


- Češalj ima funkciju nagiba. Da biste promijenili nagib, pritisnite obje tipke na obje strane češlja. Povucite ih istovremeno kao i četke za češalj. Gust češalj od nehrđajućeg čelika može se koristiti u ravnom položaju ili sa strane.

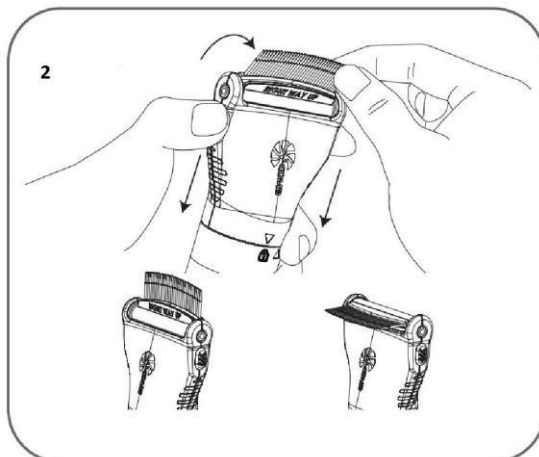


- Dobro počesljajte kosu. Ako LiceStop koristite na dugoj kosi, podijelite je na pramenove.

Postupak započinjete kad je LiceStop priključen. Pritisnite gumb na odstranjivač ušiju.

Uvijek koristite sredstvo za uklanjanje LiceStop na vratu i nastavite polako prema sredini glave, pored ušiju prema čelu. Za učinkovitu uporabu važno je nekoliko puta uviti pramen. Četkajte u svim smjerovima.

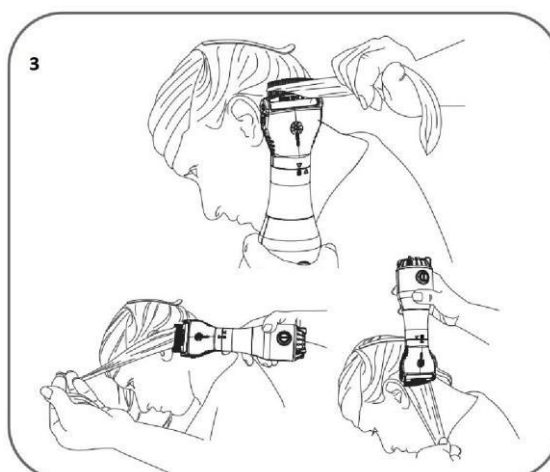

- LiceStop ima funkciju usisne snage. Temeljito usisajte uši i njihova jajašca u filter. U paketu dobivate 4 filtra. Svaka je pogodna za jednokratnu upotrebu. Svaki filter ima poklopac koji osigurava da u njemu ostanu sva jajašca i uši.
- Uklonite filter za uši nakon upotrebe. Pričvrstite poklopac na njega. Ovo zatvara zarobljene uši i njihova jajašca. Bacite filter nakon upotrebe.

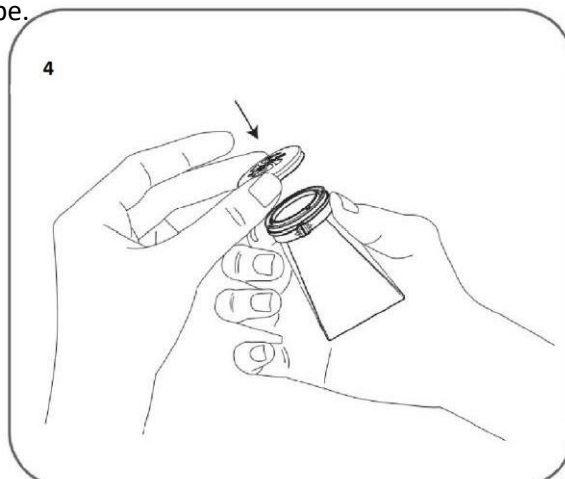

6. Uklanjanje ušiju nije bolno i sigurno je. LiceStop je također pogodan za osjetljivo vlasište.

3 načina delovanja

Metalni češalj LiceStop, uz električne udare koje mi ljudi ne otkrivamo, umrtvljuje uši i usisava ih u filter zajedno s jajašcima. Nalazi se unutar električnog uređaja za uklanjanje uši i osvjetljava se LED svjetlom.



Čišćenje nakon svake upotrebe

Čišćenje sredstva za uklanjanje ušiju LiceStop vrlo je važno. To uvjerava ponavljanje ušiju. Nakon svake upotrebe pravilno uklonite filter tamo gdje su zarobljene uši i jajašca. Obavezno ga zatvorite poklopcem.

Filter odložite na odgovarajuće mjesto. Očistite LiceStop priloženom četkom. Sredstvo za uklanjanje nije voodootporno pa ga obrišite samo suhom krpom.

Uši žive približno 30 dana

Uši su česta pojava, posebno u djece. Dobivamo ih brzo, ali još teže uklanjamo. Ženka može položiti do 150 jajašaca. Uši se iz njih izležu za 7-10 dana, pa je važno LiceStop koristiti 2 tjedna, svaki dan. Redovita uporaba temeljito će ukloniti uši i spriječiti stvaranje novih.

Upozorenje

- LiceStop možete koristiti i na kućnim ljubimcima.
- Za najbolji rezultat češljajte manje pramene kose.
- Da biste uspješno uklonili sve uši i jajašca, koristite LiceStop dva tjedna, svaki dan.
- Če je upotreba neprijatna, prekinite sa uporabom.
- Obavezno uklonite filter i bacite ga nakon uporabe.
- Isključite aparat iz utičnice prije čišćenja.
- Koristite ga u sobama koje nemaju visoku vlagu.
- Ne upotrebljavajte u blizini kade, lijevka ili tuša.
- Ne dodirujte ga mokrim rukama dok je kabel za punjenje priključen.

- Ako LiceStop padne u vodu tijekom uporabe, nemojte ga dirati.
- LiceStop nije igračka. Koristite ga samo u skladu s njegovom namjenom.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Pogodno za djecu i odrasle.
- Ako je kabel za punjenje oštećen, nemojte ga koristiti.
- Na kraju svog životnog vijeka sredstvo za uklanjanje ušiju ne bacajte u kućni otpad. Odnosite ga na odgovarajuće sabirno mjesto.



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Prekriženi simbol kante za otpatke na kotačima upozorava vas da proizvod nije kućanski otpad u EU-u. Čuvajte okoliš i stavite proizvod u pravu kantu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno upravljanje otpadom kontaktirajte najbliži centar za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Želimo vam zadovoljno uporabo :)