

# Vakuumski čistilec por CleanSkin

## Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu vakuumskega čistilca por ClearSkin!


V paketu boste prejeli:

- Vakuumski čistilec CleanSkin,
- 4 nastavke za čiščenje,
- 3 manjše tesnilne obročke (1 je že na napravi),
- 3 večje tesnilne obročke (2 je že na napravi),
- 17 higienskih gobic (1 je že na napravi),
- napajalni kabel.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila.



## Uporaba naprave in njeni deli

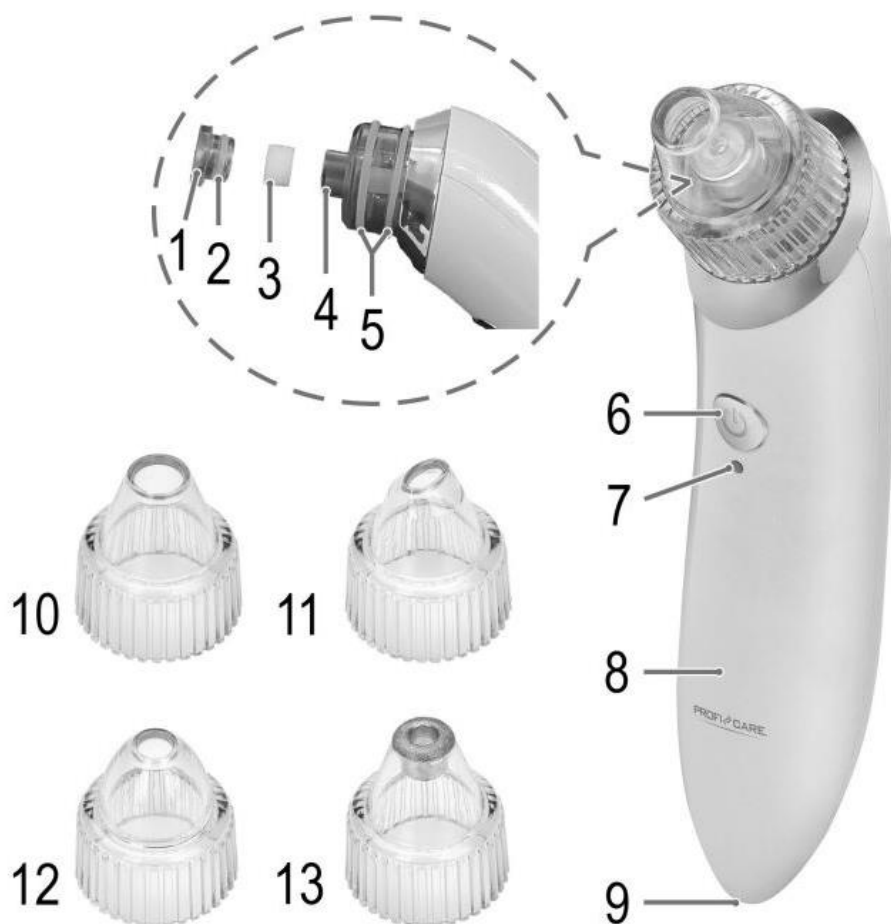

1 - Zapiralo

2 - Majhni tesnilni obroček

3 - Higienska gobica

4 - Odprtina za higiensko gobico

5 - Veliki tesnilni obroček

6 - Gumb za vklop in izklop

7 - Lučka

8 - Vakuumski čistilec CleanSkin

9 - Odprtina za polnjenje

10 - Nastavek za čiščenje ogrcev in velikih aken.

11 - Nastavek za glajenje kože naredi kožo čvrsto

12 - Nastavek za čiščenje por

13- Nastavek za nežni piling – odstranjuje nepravilnosti in odmrlo kožo.

Vakuumski čistilec kože je bil zasnovan, da bi preprečil prve znake staranja. Za to poskrbi predvsem s preprečevanjem tanjšanja kože. Z redno uporabo boste popravili kožo obraza.

Pred uporabo umijte obraz s toplo vodo in osušite obraz. Izberite želen nastavek. Preverite, da je čist in nepoškodovan ter, da je tesnilni obroček pravilno nameščen. Pritisnite gum za vklop in izklop.

Z nastavkom se dotaknite kože, da boste čutili sesanje. Vakuumskega čistilca ne pritiskajte v kožo in ga z enakomernimi gibi premikajte po obrazu. Na enem mestu se ne zadržite predolgo. Premikajte se v ravnih linijah in v eno smer (npr: od nosu proti ušesom). Izognite se uporabi na koži okoli oči. Priporočamo, da očistite:

- **brado** od sredine navzven,
- **lica** od nosu proti ušesom,
- **čelo** od sredine navzven
- **nos** od zgoraj navzdol in okoli nosnic,
- **ob ušesih** od zgoraj navzdol.

Vedno začnite z najnižjo intenzivnostjo sesanja in počasi stopnjujte. **Intenzivnost** čiščenja nastavljate z gumbom za vklop in izklop:

Število pritiskov	Lučka	Nivo intenzivnosti
1 x	Sveti	1
2 x	Zasveti 2 x	2
3 x	Zasveti 3x	3
4 x	Zasveti 4x	4
5 x	Zasveti 5x	5
6 x	Ugasne	Naprava je izključena

Priporočamo, da uporabljate vakuumski čistilec por največ dvakrat tedensko. Pogostejša uporaba lahko razdraži kožo in jo poškoduje.

Po uporabi, vakuumski čistilec izključite s pritiskom na gumb za vklop in izklop. Sedaj lahko nanese kremo za obraz. Koža bo sedaj hitreje vpila kremo ali masko za obraz. Na začetku se lahko pokaže reakcija na koži, zato priporočamo, da prvih 2-4 tednov uporabe ne menjate kreme za obraz.

Po uporabi je koža bolj občutljiva, zato v poletnih mesecih priporočamo redkejšo uporabo vakuumskega čistilca in uporabo zaščitne kreme (min. faktor 30) vsaj prve 3 dni po uporabi čistilca. Med poletnim dopustom (večja izpostavljenost soncu) odsvetujemo uporabo vakuumskega čistilca por CleanSkin.

#### **Opozorilo! Kože ne uporabljajte:**

- kjer je koža vneta ali poškodovana (odprte rane, izpuščaji, področja, kjer je koža opečena),
- če ste imeli pred kratkim poseg in se koža še ni zacelila (piling, laserska obdelava, mezoterapija ali drugi dermalni tretmaji),
- čez materina znamenjih, trajni make-up, tatuje, bradavice,
- ko sočasno uporabljate še druge naprave, ki skrbijo za piling kože,
- če ste noseči ali imate težave s srcem,
- če ste imeli na obrazu kozmetično operacijo,
- na genitalnih predelih.

## Čiščenje

Ko je potrebno, vakuumski čistilec obrišite z vlažno krpo. Poskrbite, da bo napajalni kabel vedno suh.

Nastavke očistite z uporabo milnice in sperite pod vodo. Pred uporabo naj se nastavki popolnoma posušijo.

Higienske gobice lahko sperete pod toplo tekočo vodo. Pred uporabo naj bodo povsem suhe. Če postane higienska gobica preveč umazana, jo zamenjajte.

## Hranjenje

Priporočamo, da vakuumski čistilec hranite v originalni embalaži, če je ne uporabljate daljše obdobje (npr. poleti). Škatla naj bo vedno izven dosega otrok.

## Odpravljanje napak

### Naprava ne deluje

Preverite ali je baterija prazna in jo napolnite. Če je vakuumski čistilec že priključen v električno omrežje, ga izključite. Pri tem upoštevajte lučko na napravi:

**Rdeč lučka:** polnjenje baterije.

**Zelena lučka:** polnjenje je zaključeno in baterija je polna.

**Modra lučka:** naprava je vključena, spreminjate lahko intenzivnost sesanja.

Če se baterija ne polni, kontaktirajte proizvajalca.

### Naprava ne deluje med polnjenjem

Vakuumskega čistilca kože med polnjenjem baterije ne morete uporabljati. Polnjenje traja približno 2,5 ure.

### Rezultati niso optimalni

Če ste CleanSkin uporabljali na mokri ali vlažni koži, bodo rezultati slabši. Pred uporabo vedno dobro osušite kožo.

### Na koži se pojavi rdečica in otečenost

Če koža oteka in se rdečica pojavlja daljši čas ste morda nastavek premočno pritiskali ob kožo ali ste se na enem območju ustavili predolgo.

### Tretma težko dostopnih območij

Nekateri kotički obraza so težje dostopni. Poskusite uporabiti nastavek z večih strani ali nagnite glavo, da boste lažje dosegli poln kontakt s kožo.



**Opozorilo:** Vakuumski čistilec je električna naprava, zato se z naslednjim ravnanjem izognite kratkemu stiku.

Naprava in napajalni kabel naj bosta vedno suha.

Vakuumski čistilec polnite na suhem in hladnem prostoru. Izognite se polnjenju baterije v bližini kadi, lijakov ali drugih zbiralnikov vode.

## Varnostna opozorila

- Pred prvo uporabo, preizkusite nastavke in intenzivnost sesanja na roki. Počakajte eno uro. Če se na koži pojavi reakcija in nato izgine, lahko vakuumski čistilec uporabite na obrazu.
- Napravo najprej vključite in šele nato
- Naprave ne uporabljajte na področju oči. Če želite zgladiti kožo okoli oči, s prstom druge roke pokrijte veko in se z nastavkom pomikajte od prsta proti lasišču.
- Uporaba na področju pod nosom in ustnicah je lahko boleča, zato jo odsvetujemo.
  
- Izdelek je namenjen za osebno uporabo, zato ga ne uporabljajte v komercialne namene.
- Uporabljajte v prostorih, ki nimajo visoke vlažnosti.
- Preverite, da ima omrežje, v katerega boste priključili vakuumski čistilec, primerno napetost.
- Adapterja, priključenega v električno omrežje, se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Preden napravo očistite, jo izključite iz električnega omrežja in z gumbom na čistilcu.
- Poskrbite, da se kabel ne bo bil v stiku z viri vročine, se zvijal, zavozljal in drugače poškodoval.
- Vakuumskega čistilca ne popravljajte sami. Popravilo naj izvede servis, ki bo uporabil le originalne rezervne dele.

Vakuumski čistilec in embalažo (vključno z zaščitnimi vrečkami) hranite izven dosega otrok.



**Varujte svoje okolje**, zato tega izdelka ne zavržite s splošnimi gospodinjskimi odpadki. Napravo odložite v smetnjak za elektronske naprave.



Izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv.