

Vakumski čistač pora CleanSkin

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovinu vakumskog čistača pora ClearSkin!


U pakovanju ćete dobiti:

- Vakumski čistač CleanSkin,
- 4 nastavka za čišćenje,
- 3 manja zaptivna prstena (1 je već na uređaju),
- 3 veća zaptivna prstena (2 su već na uređaju),
- 17 higijenskih sunđerčića (1 je već na uređaju),
- kabl za napajanje.

Pre prve upotrebe detaljno pročitajte uputstva.



Upotreba uređaja i njegovi delovi

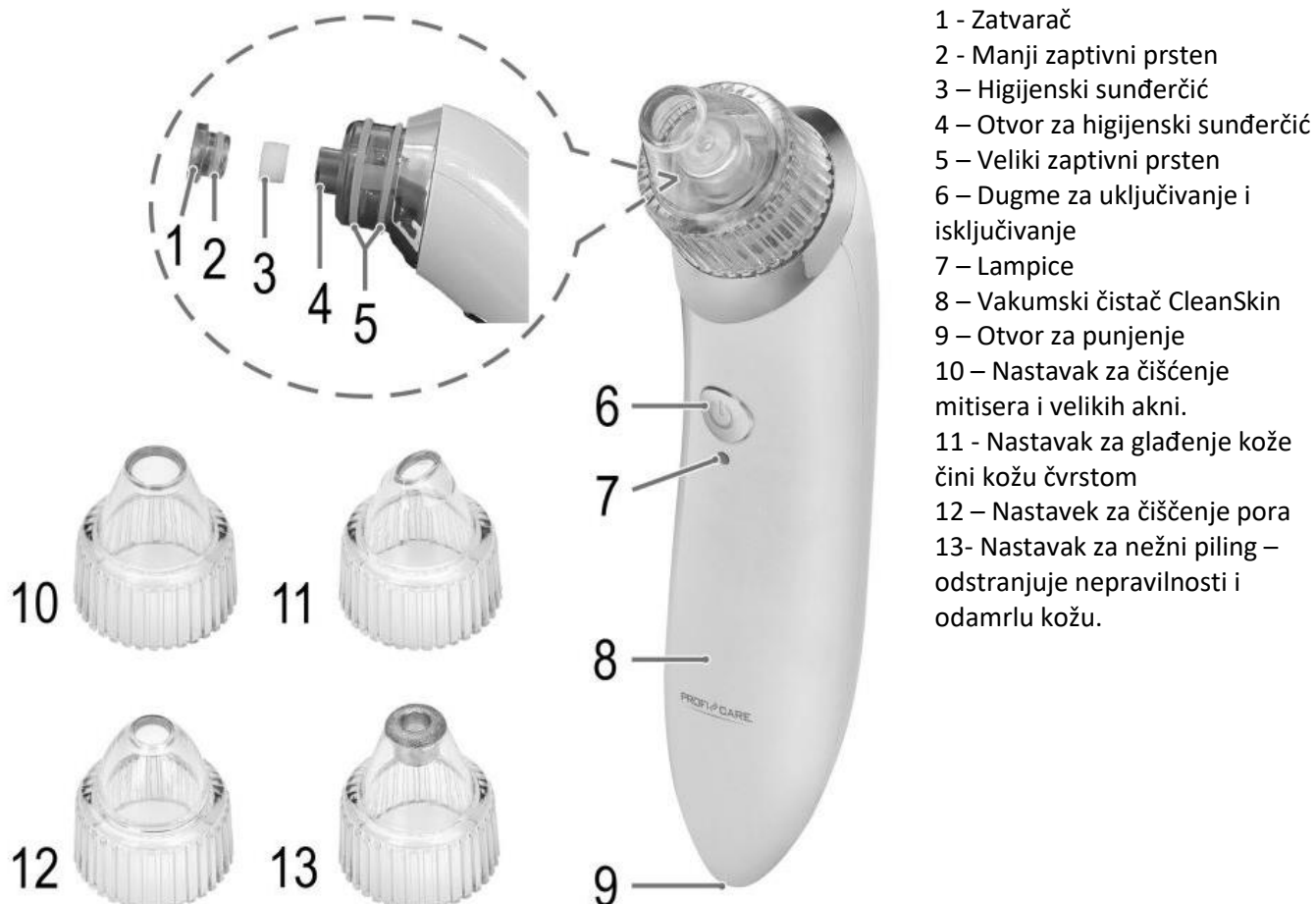

Vakumski čistač kože dizajniran je za sprečavanje prvih znakova starenja. Tu se brine uglavnom da spreči kožu od stanjivanja. Redovnom upotrebom ćete popraviti kožu lica.

Pre upotrebe umijte lice s toplom vodom i osušite lice. Izaberite željen nastavak. Proverite, da je čist i neoštećen kao i da, je zaptivni prsten pravilno namešten. Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje.

Sa nastavkom dodirnite kožu, da biste osetili usisavanje. Vakumski čistač ne pritiskajte u kožu i sa jednakomernim pokretima pomerajte po licu. Na jednom mestu se ne zadržavajte predugo. Pomerajte se u ravnim linijama i u jednom smeru (npr: od nosa prema ušima). Izbegnite upotrebu na koži oko očiju. Preporučujemo, da očistite:

- **bradu** od sredine ka spolja,
- **lica** od nosa prema ušima,
- **čelo** od sredine ka spolja
- **nos** odozgo na dole i okolo nosa,
- **uši** od gore na prema dole.

Uvek počnite sa najnižom intenzivnošću usisavanja i polako povećavajte. **Intenzivnost** čišćenja podesite sa dugmetom za uključivanje i isključivanje:

Broj pritisaka	Lampica	Nivo intenzivnosti
1 x	Svetli	1
2 x	Zasvetli 2x	2
3 x	Zasvetli 3x	3
4 x	Zasvetli 4x	4
5 x	Zasvetli 5x	5
6 x	Ugasi	Uređaj je isključen

Preporučujemo, da upotrebljavate vakumski čistač pora najviše dva puta nedeljno. Česta upotreba može razdražiti kožu i oštetiti je.

Nakon upotrebe, vakumski čistač isključite s pritiskom na gumb za uključivanje i isključivanje. Sada možete naneti kremu za lice. Koža će sada brže apsorbirati kremu ili masku za lice. Isprva se može javiti kožna reakcija, pa vam preporučujemo da ne menjate kremu za lice prva 2-4 nedelje upotrebe.

Nakon upotrebe, koža je više osetljivija, pa preporučujemo ređu upotrebu u letnjim mesecima vakumskog čistača i upotrebu zaštitne kreme (min. faktor 30) barem prva 3 dana nakon korišćenja čistača. Tokom letnjeg odmora (veća ispostavljenost suncu) ne savetujemo upotrebu vakumskog čistača pora CleanSkin.

Upozorenje! Ne koristite za kožu:

- gde je koža upaljena ili oštećena (otvorene rane, osipi, područja na kojima je koža spaljena),
- ako ste nedavno imali postupak i koža još nije ozdravila (piling, laserski tretman, mezoterapija ili drugi dermatološki tretmani),
- preko mladeža, trajnog make-up, tetovaže, bradavice,
- kada istovremeno upotrijebljavate druge uređaje za piling kože,
- ako ste trudni ili imate problema s srcem,
- ako ste imali na licu kozmetičku operaciju,
- na genitalnim predelima.

Čišćenje

Po potrebi, obrišite vakumski čistač vlažnom krpom. Proverite da li je kabal za napajanje uvek suv.

Očistite nastavke sapunom i isperite pod tekućom vodom. Ostavite da se nastavci u potpunosti osuše pre upotrebe.

Higijenski sunđerčići mogu se oprati pod toplom tekućom vodom. Pre upotrebe držite ih potpuno suvim. Ako higijenski sunđerčići postanu previše prljavi, zamenite ih.

Pakovanje

Preporučujemo, da vakumski čistač spakujete u originalnu ambalažu, ako ga ne upotrijebjavate duži vremenski period (npr. leti). Kutiju uvek čuvajte izvan domašaja dece.

Rešavanje problema

Uređaj ne funkcioniše

Proverite da li je baterija prazna i napunite je. Ako je vakumski čistač već priključen u električnu struju, isključite ga. Pri tome posmatrajte svetlost na uređaju:

Crvena lampica: punjenje baterije.

Zelena lampica: punjenje je završeno i baterija je puna.

Plava lampica: uređaj je uključen, možete promeniti intenzitet usisavanja.

Ako se baterija ne puni, kontaktirajte proizvođača.

Uređaj ne funkcioniše tokom punjenja

Vakumski čistač kože tokom punjenja baterije ne možete upotrijebjavati. Punjenje traje približno 2,5 sata.

Rezultati nisu optimalni

Ako ste CleanSkin upotrijebjavali na mokroj ili vlažnoj koži, rezultati će biti slabiji. Pre upotrebe uvek dobro osušite kožu.

Na koži se pojavilo crvenilo i otečenost

Ako koža otiče i crvenilo se pojavljuje duže vreme ste možda nastavak previše snažno pritisnuti na kožu ili zaustaviti na jednom području predugo.

Tretman teško dostupnih područja

Nekim je kutovima lica teže pristupiti. Pokušajte koristiti višestrani dodatak ili nagnite glavu kako biste olakšali kontakt s cijelom kožom.



Upozorenje: Vakumski čistač je električni uređaj, zato izbegavajte kratki spoj sledeći ovaj postupak.

Uvek držite uređaj i kabal za napajanje suvim.

Vakumski čistač puniti na suvom i hladnom prostoru. Izbegavajte punjenje baterije u blizini kade, umivaonika ili drugih sudopera vode.

Sigurnosna upozorenja

- Pre prve upotrebe ispitajte nastavke i intenzitet usisavanja pri ruci. Sačekajte jedan sat. Ako se na koži pojavi reakcija, a zatim nestane, možete koristiti usisavač na licu.
- Uređaj najpre uključite tek tada
- Ne koristite uređaj na području oko očiju. Kako biste izgladili kožu oko očiju, prstom druge ruke pokrijte kapak i pomaknite vrh prsta prema vlasištu.
- Upotreba na području ispod nosa i usana može biti bolna, pa je ne savetujemo.
- Proizvod je namenjen ličnoj upotrebi, stoga ga nemojte koristiti u komercijalne svrhe.
- Koristite u prostorijama koje nemaju visoku vlažnost.
- Proverite ima li mrežni napon na koji ćete priključiti usisavač odgovarajući napon.
- Adapter, priključenog u električnu mrežu, ne dodirujte s mokrim rukama.
- Pre čišćenja uređaja, odvojite ga od mreže dugmetom na uređaju.
- Pazite da kabl ne dođe u dodir s izvorima topline, ne uvrne, zakači i na neki drugi način ošteti.
- Vakumski čistač ne popravljajte sami. Popravak servisirajte samo originalnim rezervnim delovima.

Vakumski čistač i ambalaža (zaključno sa zaštitnim vrećicama) čuvati izvan dohvata dece.



Pobrinite se za svoju okolinu, stoga ovaj proizvod ne odlažite zajedno s kućnim otpadom. Uređaj odložite u elektronički kontenjer za otpad.



Proizvod je u skladu sa zahtevima važećih smernica.