

Električni odstranjivač vaši LiceStop

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini električnog odstranjivača vaši LiceStop!

Dobićete u paketu:

- Odstranjivač vaši LiceStop,
- kabl za punjenje,
- 4x filter,
- četkica za čišćenje.




Sestavni delovi:

1. Odstranjivač vaši LiceStop,
2. češalj,
3. dugme za uključivanje/isključivanje odstranjivača,
4. filter,
5. kabl za napajanje.


Upotreba

Pre svake upotrebe dobro pročesljajte kosu. Rasporedite kosu koja je duža u pramenovima.

1. Sigurno pričvrstite filtar za uklanjanje ušiju na češalj za uklanjanje dok ne začujete klik. Zatim stavite češalj na sredstvo za uklanjanje vaši. Ispravno podešavanje prikazano je na slici 1.

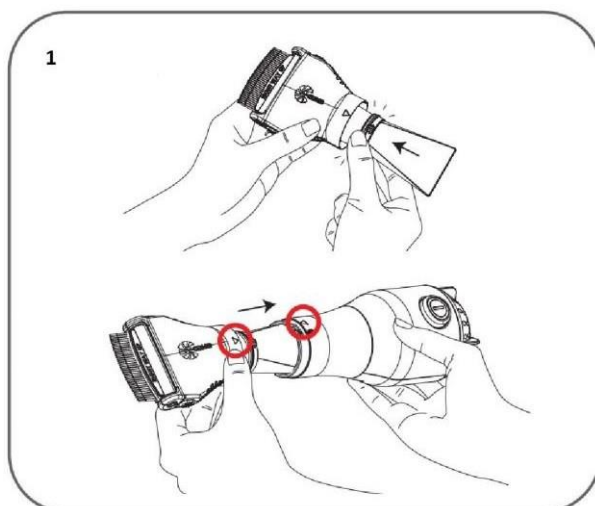


- Češalj ima funkciju nagiba. Da biste promenili nagib, pritisnite obe tipke na obe strane češlja. Povucite ih istovremeno kao i četke za češalj. Gust češalj od nehrđajućeg čelika može se koristiti u ravnom položaju ili sa strane.

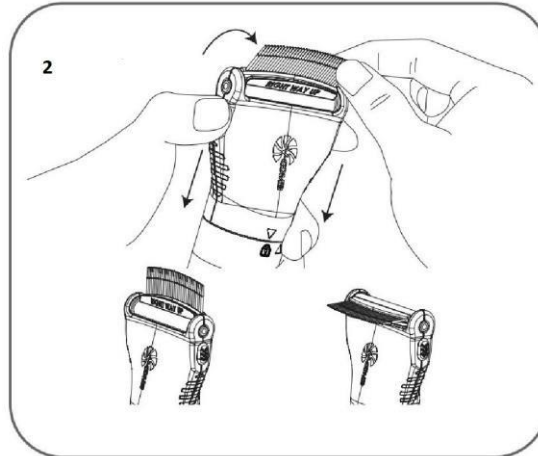


- Dobro počesljajte kosu. Ako LiceStop koristite na dugoj kosi, podelite je na pramenove.

Postupak započinjete kad je LiceStop priključen. Pritisnite dugme na odstranjivač vaši.

Uvek koristite sredstvo za uklanjanje LiceStop na vratu i nastavite polako prema sredini glave, pored ušiju prema čelu. Za učinkovitu upotrebu važno je nekoliko puta uviti pramen. Četkajte u svim smerovima.

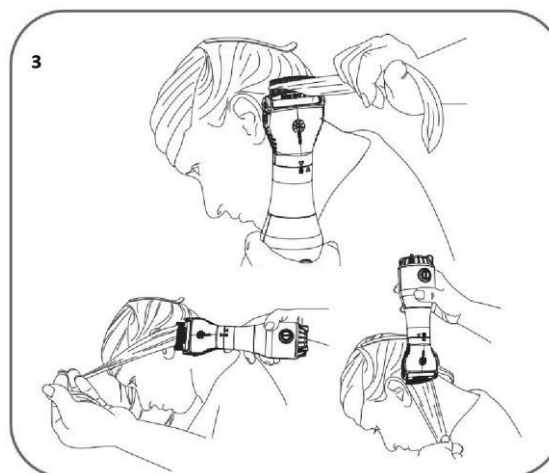

- LiceStop ima funkciju usisne snage. Temeljito usisajte uši i njihova jajašca u filter. U paketu dobivate 4 filtra. Svaka je pogodna za jednokratnu upotrebu. Svaki filter ima poklopac koji osigurava da u njemu ostanu sva jajašca i vaši.
- Uklonite filter za vašinakon upotrebe. Pričvrstite poklopac na njega. Ovo zatvara zarobljene vaši i njihova jajašca. Bacite filter nakon upotrebe.

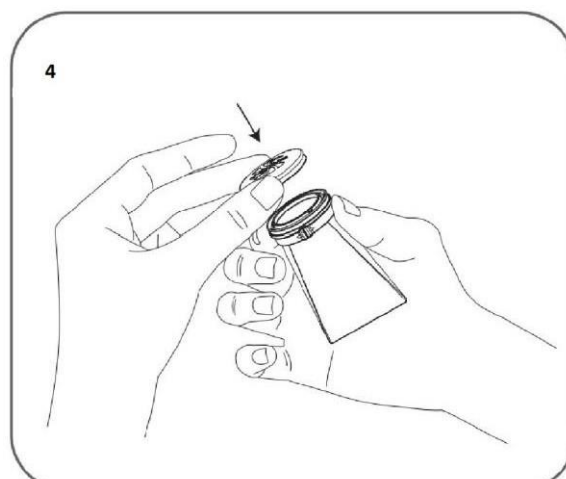

6. Uklanjanje vaši nije bolno i sigurno je. LiceStop je također pogodan za osetljivo vlasište.

3 načina delovanja

Metalni češalj LiceStop, uz električne udare koje mi ljudi ne otkrivamo, umrtvljuje vaši i usisava ih u filter zajedno s jajašcima. Nalazi se unutar električnog uređaja za uklanjanje uši i osvetljava se LED svetlom.



Čišćenje nakon svake upotrebe

Čišćenje sredstva za uklanjanje vaši LiceStop vrlo je važno. To uverava ponavljanje ušiju. Nakon svake upotrebe pravilno uklonite filter tamo gde su zarobljene vaši i jajašca. Obavezno ga zatvorite poklopcem.

Filter odložite na odgovarajuće mesto. Očistite LiceStop priloženom četkom. Sredstvo za uklanjanje nije voodootporno pa ga obrišite samo suvom krpom.

Vaši žive približno 30 dana

Vaši su česta pojava, posebno u dece. Dobijamo ih brzo, ali još teže uklanjamo. Ženka može položiti do 150 jajašaca. Vaši se iz njih izležu za 7-10 dana, pa je važno LiceStop koristiti 2 nedelja, svaki dan. Redovna upotreba temeljno će ukloniti vaši i sprečiti stvaranje novih.

Upozorenje

- LiceStop možete koristiti i na kućnim ljubimcima.
- Za najbolji rezultat češljajte manje pramene kose.
- Da biste uspešno uklonili sve uši i jajašca, koristite LiceStop dve nedelje, svaki dan.
- Ako je upotreba neprijatna, prekinite sa upotrebom.
- Obavezno uklonite filter i bacite ga nakon upotrebe.
- Isključite aparat iz utičnice pre čišćenja.
- Koristite ga u sobama koje nemaju visoku vlagu.
- Ne upotrebljavajte u blizini kade, lavaboja ili tuša.
- Ne dodirujte ga mokrim rukama dok je kabl za punjenje priključen.

- Ako LiceStop padne u vodu tokom upotrebe, nemojte ga dirati.
- LiceStop nije igračka. Koristite ga samo u skladu s njegovom namenom.
- Čuvati izvan dohvata dece.
- Pogodno za decu i odrasle.
- Ako je kabl za punjenje oštećen, nemojte ga koristiti.
- Na kraju svog životnog veka sredstvo za uklanjanje vaši ne bacajte u kućni otpad. Odnosite ga na odgovarajuće sabirno mesto.



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Prekriženi simbol kante za otpatke na točkovima upozorava vas da proizvod nije domaći otpad u EU-u. Čuvajte okolinu i stavite proizvod u pravu kantu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi. Za pravilno upravljanje otpadom kontaktirajte najbliži centar za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Želimo vam zadovoljnu uporabo :)